



●本体

〈正面〉

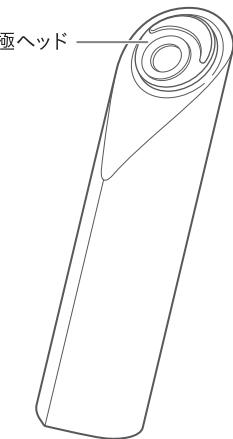


〈背面〉

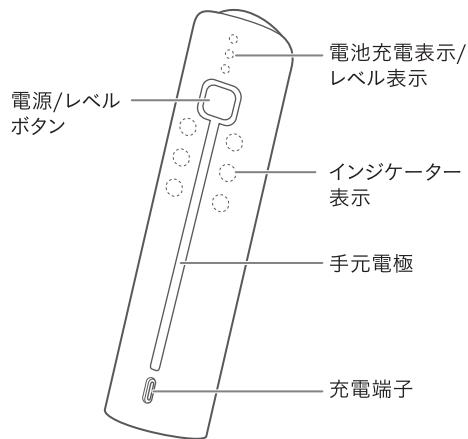

充電のしかた

- ・本体と充電用USBケーブルを図のように接続すると、充電が始まります。

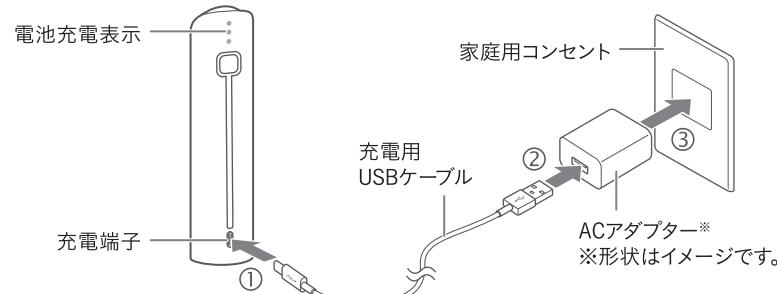

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

※必ず付属のACアダプターと充電用USBケーブルを使用してください。

※充電端子に水や汚れが無いことを確認して接続してください。

●付属品

- ・ACアダプター
- ・充電用USBケーブル(USB Type-C™)
- ・取扱説明書(保証書付)


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

●充電表示

- ・充電中は、電池充電表示が下図の通りに点滅または点灯します。


:点滅

:点灯

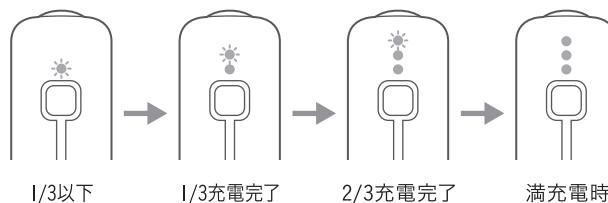

使いかた

使用順序

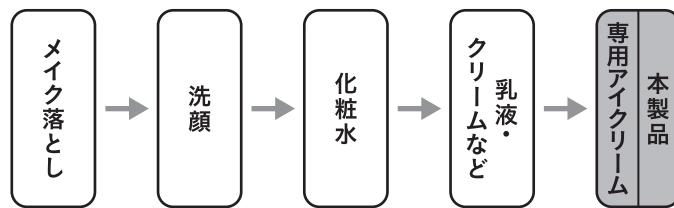

- ・本製品は専用のアイクリームとともにご使用ください。
- ・使用量目安:パール粒(小)2粒分を、両方のまぶたと目のまわりより広い範囲にのばします。


使用上の注意

- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)は使用しないでください。
- LED光を直接のぞき込まないでください。
- 必ず手元電極に触れるように持ってください。
- 推奨使用環境温度15°C~30°C

ケアのしかた

電源/レベルボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。
電池残量表示後、レベルを選択する。

- ・電源/レベルボタンでレベルを選択してください(レベル1~3)。

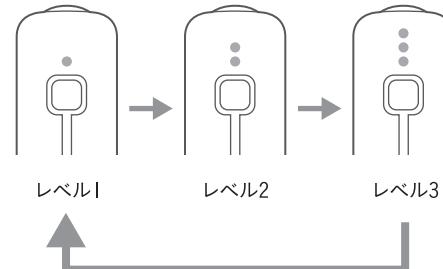

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

- 2 背面の手元電極に触れるように本体を持つ。
- 3 電極ヘッドをお肌にあてて動かす(P.15参照)。
※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりお肌にあててください。
- 4 設定時間経過後、自動で電源がオフになります。
- 5 お肌を整える。
 - ・目もとに残ったアイクリームをなじませてください。
- 6 電極ヘッドに付いた汚れや専用アイクリームを拭き取る(P.17参照)。

動かしかた

- はじめに
- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に2cm
※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- 電極ヘッド全体がお肌に触れるよう、お肌に垂直にあて、常に動かしながら使用してください。
 - 出力レベルは3段階ありますが、高いと熱く感じる場合があります。初めてご使用の方は、必ずレベル1で使用してください。
 - 熱いと感じる場合はレベルを下げるで使用してください。
 - まぶたや目のまわり(骨のある部分までは使用可)には電極ヘッドをあてないでください。


矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

①～④を数回繰り返し、最後に⑤を行ってください。

片側2分ずつ行ってください。専用セラムは電源をオンにする前、一時停止中に分けて片側ずつ塗布してください。




使用できない部位：まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)

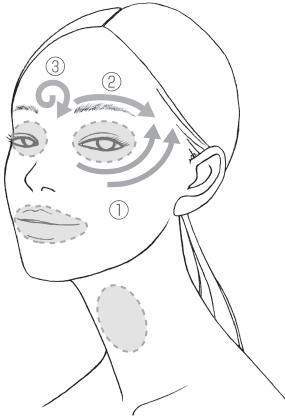

① 目の下からこめかみに向かって動かす

② 眉頭からこめかみに向かって動かす

③ 眉間の上を、円を描くように動かす

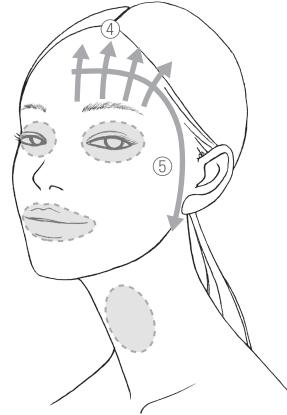

④ 眉から生え際に向かって引き上げる

⑤ 最後に、額中央～こめかみ～耳の前～耳下へ流す

詳しい使いかたは下記を参照ください。

<http://www.effectimbeauty.com/products/3d-beauty-lifting-eye-care/>



●製品仕様

定 格	DC5V 2.0A
消費 電 力	約2.5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	本体:約W33×D37×H142(mm)
製 品 質 量	本体:約120g
材 質	本体:ABS樹脂/ポリカーボネート/シリコンゴム 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 属 品	ACアダプター、充電用USBケーブル、取扱説明書
推奨環境温度	15°C~30°C

Memo

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品・付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはお客様窓口(P.22)にご相談ください。

Memo

Memo