

No.

保証書

持込修理

品 名	家庭用美容機器	型 番	EFM03
形 名	エフェクティム ブライト ビューティー リフティング アクティベーター		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間：お買い上げ日から1年間	
店名・住所・電話	<p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記*無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店舗がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品は本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、お客様窓口にご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- ・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

- ・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.effectimbeauty.com/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

企画元

株式会社 エフェクティム

〒104-0061

東京都中央区銀座7-5-5

お客様窓口 0120-81-2101



www.effectimbeauty.com

EFFECTIM

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容機器

エフェクティム ブライト ビューティー リフティング
アクティベーター

EFM03



もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	8
各部のなまえ	9
モードについて	10
ご使用の前に	11
使いかた	15
使い終わったら	19
こんなときには	20
アフターサービス	24
●製品仕様	25
●保証について	25
保証書	27

このたびは、エフェクティム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。



医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

- ベースメーカーなど体内植込式医用電気機器
- 人工心肺など生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

禁 止



警 告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患
- 発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患
- 内臓疾患・心臓疾患・障害及びその疑いのある人・皮膚病
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人
- 疲労が激しい人・敏感肌またはお肌の弱い人・体調がすぐれない人
- 酒気帯びの人・妊娠中・生理中・授乳中の人の・血栓のある人
- 眠気をさそう薬を服用中の人の・温度感覚喪失が認められる人
- 医師から運動を禁じられている人
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人
- 過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 目や顔の手術を行った人・目や顔に疾患のある人、および治療中の人の

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。



禁 止

- 切り傷・手術(整形手術を含む)をした部位・口内や陰部、粘膜など
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・カユミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球・にきび・耳
- まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)・頭部・鼻骨
- インプラントの上・アートマークをしている部位

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

顔以外には使用しない。

けがの原因となります。

過剰な連続使用をしない。(業務用としての使用など)

事故・故障・けがの原因となります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

爆発・火災のおそれがあります。

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



警 告

同じ箇所にあて続けない。

必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。

やけどの原因となります。

次のような場所で機器の使用・保管しない。

- ・ほこりの多い場所・屋外、直射日光のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所・油煙、湯気のある場所
 - ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。



禁 止

ACアダプターおよびUSBケーブルを破損、加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

ACアダプターおよびUSBケーブルが傷んだり、差し込みがゆいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

ACアダプターおよびUSBケーブルを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



使用者の制限

子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故・けがの原因となります。

本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



警 告



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損や発火の原因となります。



落 下 禁 止

不安定な場所に置かない、保管しない。重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因となります。



分 解 禁 止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



タコ足配線
禁 止

本製品には専用のACアダプターおよびUSBケーブルを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



水かけ禁 止

浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用・保管しない。水をかけたり、つけたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

ACアダプターや充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



発 火 注意

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



警 告



電子レンジや高圧容器に入れない。

破裂注意

発熱・発火・破裂の原因となります。



必ず守る

必ず交流100V～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。

充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。

充電中の場合は、本体から充電用USBケーブルを抜く。



プラグを抜く

本体やコンセントからACアダプターや充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。

また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプターを抜く

使用しないとき・お手入れするときはACアダプターや充電用USBケーブルをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



注 意

使用前に電極/ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

強く押し当てず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押しつけたり一ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。

電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。

事故の原因となります。

オーバーケアをしない。

1日1回(一時停止中を除く6分間)までの使用限度を守る。

肌トラブルの原因となります。

ペットには使用しない。

けがの原因となります。

電極部を金属・物にあてない。

発熱・発火・故障・破損の原因となります。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。

屋外で使用しない。

故障の原因となります。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しづつ調節してください。事故・けがの原因となります。

お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



注意

使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。

事故・けがの原因となります。

顔に使用するときは、必ずメイクを落として使用する。

メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

頬・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。

事故・故障の原因となります。



必ず守る

電極とお肌の間に、常に専用セラムがあるように、途中で補充する。

専用セラムが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または水・専用セラムなどでお肌を湿らせてから使用する。

そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。

使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した皮脂汚れや専用セラムなどを取り除く。

故障・肌トラブルの原因となります。

機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。

肌トラブルの原因となります。

使用中、コンタクトレンズのこすれを感じたら使用を中止するか、コンタクトレンズを外して使用する。

海外でのご使用について



警告



必ず守る

必ず交流100V～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。




発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


●本体

〈正面〉 〈背面〉

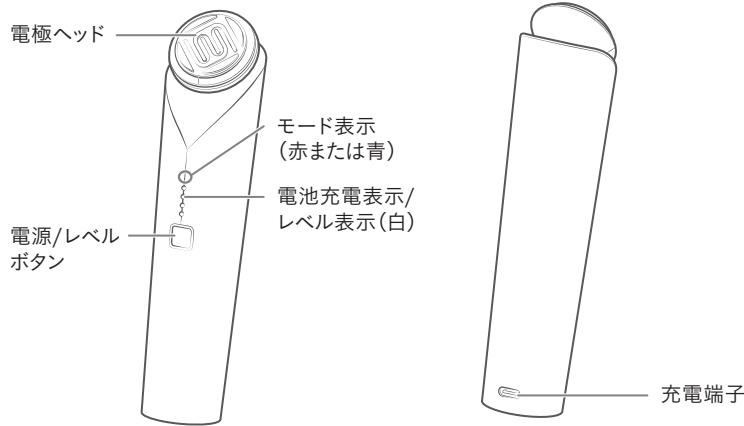

本製品にはリフトモードとライトモードがあり、選択してケアすることができます。

	リフトモード	ライトモード
電極ヘッド ・モード表示	赤	青

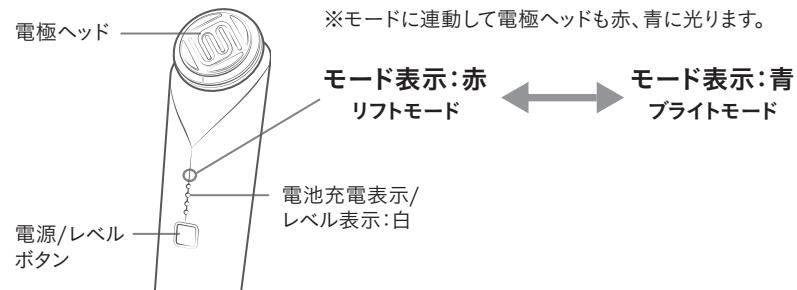

●付属品

- ・ACアダプター
- ・充電用USBケーブル(USB Type-C™)
- ・取扱説明書(保証書付)
- ・クイックガイド(Quick Guide)

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

●使用頻度


- ・どちらかのモードを選択し、1日1回6分の使用を上限としてください。
(1日の間に「リフトモード」と「ライトモード」の両方を使用するのは避けてください)

※動かしかたはリフトモード・ライトモード共通です。

ご使用の前に

充電のしかた

- 本体と充電用USBケーブルを図のように接続すると、充電が始めます。

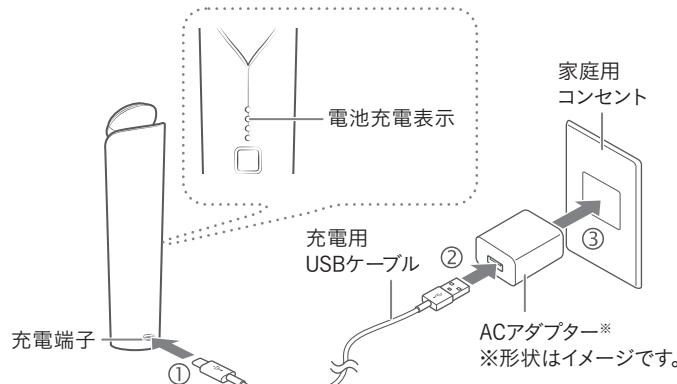

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

※必ず付属のACアダプターと充電用USBケーブルを使用してください。

※充電端子に水や汚れが無いことを確認して接続してください。


※充電中は本体・アダプターが温かくなります。手で触れられる程度の温度であれば問題ありません。

●充電表示

- 充電中は、電池充電表示が下図の通りに点滅または点灯します。(白)

◆:点滅

●:点灯

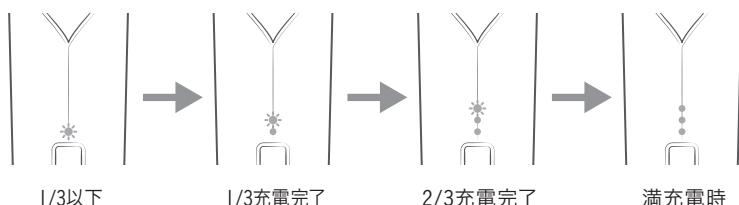

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5時間	約50分

※充電環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です。
※動作時間は使用レベル・使用環境によつて変わります。

※電池の残量、使用環境によって、充電時間は前後します。

お肌へのプレテスト

※本製品や専用セラムを初めてご使用になる際は必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

お肌を清潔な状態にする。

- 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取ります。

2 腕の内側に専用セラムを塗り、約3分間本製品を使用する。

- プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



●安全機能

・温度センサー

お肌や電極ヘッドの温度が高くなり過ぎると、安全のため電源がオフになります（電極ヘッドの点滅5回とブザー音5回でお知らせ）。その場合は、約30分間本体を休ませてください。

・モーションセンサー

本体の動きを検知し、電極ヘッドを同じ箇所にあて続けている場合は、安全のため出力を停止します。

本体を動かす速度が遅くなると、モーションセンサーの働きにより温感が弱まることがあります。

●オートポーズ（自動一時停止）/


オートオフ（自動電源オフ）機能

電源をオンにしてから約3分経過すると「ピピピッ」と音がなり、一時停止します（電極ヘッドが点滅）。電源/レベルボタンを押すと動作が再開し、約3分経過すると自動で電源がオフになります。

一時停止状態で約3分経過しても電源がオフになります。


●電池残量表示

電源をオンまたはオフにすると、電池充電表示が3回点滅して電池残量をお知らせします。

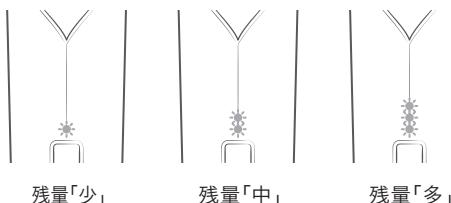

使いかた

使用順序

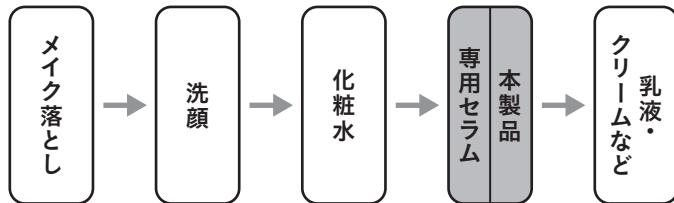

- ・顔の左右半分ずつケアします。
- ・専用セラムとともにご使用ください。(リフトモード・ブライトモード共通)
※使用量目安:半顔につき3プッシュ分を頬にのせます。
指に残ったセラムは額・あご・首筋へのばしてください。
※半顔ずつ、ケアの直前(電源をオンにする前、一時停止中)に塗布することをおすすめします。

使用上の注意

- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- まぶた、目のまわりは使用しないでください。(目まわりの骨のある部分までは使用可)
- LED光を直接のぞき込まないでください。
- 推奨使用環境温度15°C~30°C

ケアのしかた

電源をオンする。

- ・電源/レベルボタン(以下、ボタンと記載)を「ピピッ」と音がするまで長押し(約1秒)してください。
- ・白いランプが3回点滅後、赤いランプが点滅します。


2 モードを選択して、確定する。

ランプの色:【赤】リフトモード 【青】ブライトモード

- ・ボタンを短押しするとモードを変更できます。
- ・ランプが点滅している状態で、ボタンを長押し(約2秒)すると「ピーピピッ」と鳴り、モードが確定します。
- ・モード表示と電極ヘッドが同じ色で点灯し、ケアがスタートします。

3 レベルを選択する。

- ・ボタンを短押しするとレベル(1-3)に応じて白いランプが点灯します。

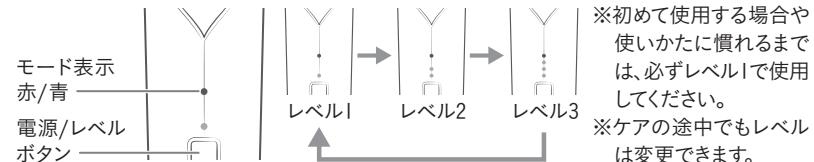

4 電極ヘッドをお肌にあてて動かす(P.17参照)。

- ※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。
※ケアの途中で電源オフしたいときは、ボタンを長押し(約1秒)してください。

5 約3分後、「ピピピッ」と鳴り、一時停止する。

ボタンを短押しして反対側のケアを再開する。

※停止中は電極ヘッドが点滅します。

6 約3分後、「ピーピー」と鳴り、自動で電源がオフになる。

※電源が切れる直前に白いランプが点滅します。そのランプが1つになったら充電してください。

7 お肌を整える。

- ・適宜乳液やクリームなどを塗布してください。

8 電極ヘッドに付いた汚れや専用セラムを拭き取る(P.19参照)。

※ケアの途中でモードを変えることはできません。一旦電源オフし、1,2の手順を行ってください。

動かしかた(片側3分ずつのお手入れ)

はじめに

リフトモード・ライトモード共通の動かしかたです。

本体を動かすスピードの目安: 1秒間に2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。

- 電極ヘッド全体がお肌に触れるよう、お肌に垂直にあて、常に動かしながら使用してください。
- 出力レベルは3段階ありますが、高いと熱く感じる場合があります。初めてご使用の方は、必ずレベル1で使用してください。
- 熱いと感じる場合はレベルを下げて使用してください。
- まぶたや目のまわり(骨のある部分までは使用可)、唇、首中央には電極ヘッドをあてないでください。

使いかた

顔の左右半分ずつ、片側につき3分ずつケアします。

※専用セラムは、片側ずつ、美容機器によるケアの直前(電源オンする前、一時停止中)
に塗布してください。(使用量の目安: 1回3プッシュ)

矢印に沿ってお肌の上を動かしてください。

①～③を数回繰り返し、最後に④を行ってください。




使用できない部位: まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)、唇、首中央



① 頬、顔の中心から外側へやや引き上げるように動かす

② 眉間から鼻側面へ動かす

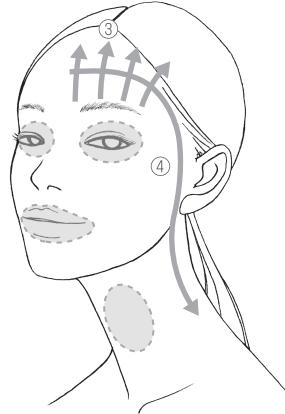

③ 頬の下から髪の生え際に向かって引き上げる

④ 最後に、額中央～こめかみ～耳の前～首筋～鎖骨へ流す

詳しい使いかたは下記を参照ください。

https://www.effectimbeauty.com/products_brightlifting/



使いかた

使い終わったら

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

1 電源をオフにする。

2 電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・専用セラムが付着した状態で放置しないでください。
- ・防水製品ではありません。水洗いはしないでください。
- ・充電端子に汚れが付着していないことを確認してください。

3 電極ヘッド以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターと充電用USBケーブルを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避け、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.20～P.21)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえお客様窓口(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ 電源/レベルボタンを長押ししていない → 充電不足	→ 電源/レベルボタンを約1秒長押しして電源をオンにしてください → 充電をしてください
充電しても数分しか使えない	→ 充電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた → 電源/レベルボタンを間違えて押してしまった → オートオフになっている	→ 販売店またはお客様窓口にご連絡ください(P.24) ※故障の原因となるためお客様では交換できません → 電源/レベルボタンを約1秒長押しして再度電源をオンにしてください → 電源/レベルボタンを押してください(P.15)
充電が開始されない (電池充電表示) が点滅しない	→ ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない → 充電用USBケーブルが本体、ACアダプターに差し込まれていない → 専用のACアダプターを使用していない	→ ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください → 充電用USBケーブルを正しく差し込んでください(P.11) → PCなどから充電すると電力が足りず充電されない場合があります。専用のACアダプターを使用してください → 電源をオフにして1時間以上休ませてください
本体が熱い	→ 連続使用した	

こんな症状

考えられる原因

処置方法

熱い・電気刺激を感じすぎる

- 設定レベルが高い → 電源/レベルボタンでレベルを下げてください
- 電極ヘッド全体がお肌にあたっていない → 電極ヘッド全体をお肌にあててください
- 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けている → 動かしながらご使用ください
- 動かすスピードが遅い → 少し速く動かしてください

熱や電気刺激を感じない

- 設定レベルが低い → 電源/レベルボタンでレベルを上げてください
- お肌が乾燥している → 専用セラムをお肌に足してください
- オートオフになった → 電源をオンにしてください
- 動かすスピードが速い → 少しゆっくり動かしてください

よくあるご質問

Q

A

朝、メイク前に使用しても良いですか？

問題ありません。専用セラムとともに使いください。

毎日使用してもお肌に負担はないですか？

問題ありません。1日1回(一時停止中を除く6分間)までの使用限度は守ってください。
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。

専用セラムの適切な使用量は？

片側ディスペンサー3回プッシュ分、顔全体で6回プッシュ分をお使いください。少し足りないと感じた場合は付け足すことをおすすめします。

お肌の上でスムーズに動かせません

・お肌の状態によっては最初に使用する専用セラムの使用量が足りないと、動きが悪い場合があります。
・無理に動かそうとせずにゆっくりと動かしてみてください。

ケア中に電気刺激や熱の感じ方が変わります

片側3分間の中で異なる刺激を送っているので問題ありません。

使用後にお肌がほてります

美容機器の温め効果によるものです。気になる場合は水や保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。保冷剤を使用する際は、お肌に直接触れないようにタオルを巻くなどしてご使用ください。

使用後、お肌にポロカスが出ることがあります

乾燥によって発生することがありますが、乳液をコットンで塗布すると、ポロカスが取れ、滑らかなお肌になります。

肌にピリピリ感があります

美容機器の電気刺激によるものです。電源/レベルボタンで調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。
初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

Q	A
レベルは高い方が効果はありますか?	それぞれの肌状態に合っていることが重要ですので、ほてりやひりつくなど刺激を感じたらレベルを下げてご使用ください。
顔そり後は使用しない方がよいですか?	剃刀やシェーバーによってお肌に負担がかかっている場合がありますので、日を空けて使用することをおすすめします。
美容機器を動かすと顔のたるみが余計できるように感じます	力を入れ過ぎず、優しく動かしてください。
お風呂で使用できますか?	防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。
充電しても使用時間が短くなりました	充電池の寿命と考えられます(約300回が目安)。充電池は消耗品です(保証対象外)。交換をご希望の場合は、お客様窓口にご相談ください(P.24)。
廃棄するにはどうすればよいですか?	自治体の分別ルールに従って廃棄してください。本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

こんなときには



●充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはお客様窓口(下記)にご相談ください。

●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

お客様窓口

0120-81-2101 (通話料無料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

アフターサービス

専用化粧品(専用セラム)



エフェクティム

販 売 名: エフェクティム ブライト リフティング セラム
内 容 量: 30ml

商品詳細・お買い求めはお客様窓口(上記)に
お問い合わせください。

WEBサイト www.effectimbeauty.com

※予告なく販売を終了する場合があります。



●製品仕様

定 格	DC5V 2.0A
消 費 電 力	約7.5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	本体:約W44×D45×H186(mm)
製 品 質 量	本体:約190g
材 質	本体:ポリカーボネート 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス
生 産 国	日本
付 属 品	ACアダプター、充電用USBケーブル、取扱説明書
推奨環境温度	15°C～30°C

Memo

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品・付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはお客様窓口(P.24)にご相談ください。