

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容機器	型番	EFM04
形名	エフェクティム スムース ビューティー リフティング アクティブーター		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡ください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店舗がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
(一) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
(二) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損傷の場合
(三) 改造・分解の形跡がある場合
(四) 説明書、注意書等弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法での使用が確認された場合
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
(五) 説明書又は明細書のご提示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
(六) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
(七) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
(八) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
- ご購入の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入時で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、お客様窓口にご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
(ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
(ハ) 以下①～⑥が原因による故障および損傷の場合
①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。
※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ(<https://www.effectimbeauty.com/Page/repair.aspx>)をご確認ください。

- 補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。弊社ホームページ(<https://www.effectimbeauty.com/Page/repair.aspx>)をご確認ください。
- 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.effectimbeauty.com/privacy-policy/>)をご参照ください。
- 利用目的
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

企画元

株式会社 エフェクティム

〒104-0061
東京都中央区銀座7-5-5
お客様窓口 0120-81-2101



www.effectimbeauty.com

EFFECTIM



保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容機器

エフェクティム スムース ビューティーリフティング
アクティブーター

EFM04



もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	8
各部のなまえ	9
ご使用前に	10
使いかた	13
使い終わったら	18
こんなときには	19
アフターサービス	23
●製品仕様	24
●保証について	24
保証書	27

このたびは、エフェクティム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。
*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険



禁止

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

- ◆医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



警告

●次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- ・幼児や自分で意思表示できない人
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
- ・自己免疫疾患のある人

●次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人
- ・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人
- ・発熱している人・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人・通院して薬を服用中の人
- ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

●次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
- ・酒気帯びの場合・頭部・口内や陰部、粘膜など
- ・眼球・まぶた(眼窩)・のど・膨らんだホクロ
- ・ウイルス性のイボ・骨折をしている部位
- ・切り傷・肝斑のある部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位
*施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位

皮膚の薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

顔以外には使用しない。

けがの原因となります。

過剰な連続使用をしない。(業務用としての使用など)

事故・故障・けがの原因となります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

爆発・火災のおそれがあります。



禁止

警告

同じ箇所にあて続けたい。
必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。

やけど・低温やけどの原因となります。

次のような場所で機器の使用・保管しない。

- ・ほこりの多い場所・屋外、直射日光のあたる場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所・油煙、湯気のあたる場所
 - ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。



禁止

ACアダプターおよびUSBケーブルを破損、加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

ACアダプターおよびUSBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

ACアダプターおよびUSBケーブルを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



使用者の制限

子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故・けがの原因となります。

本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。

警告



異臭・異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損や発火の原因となります。



落下禁止

不安定な場所に置かない、保管しない。重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



タコ足配線
禁止

本製品には専用のACアダプターおよびUSBケーブルを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



水かけ禁止

浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用・保管しない。水をかけたり、つけたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

ACアダプターや充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

警告



破裂注意

電子レンジや高压容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。

本体等に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。

機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

必ず交流100V～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。

充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。
充電中の場合は、本体から充電用USBケーブルを抜く。



プラグを抜く

本体やコンセントからACアダプターや充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプターを抜く

使用しないとき・お手入れするときはACアダプターや充電用USBケーブルをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

注意

使用前に電極/ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

強く押し当てず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。

電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
事故の原因となります。



禁止

オーバーケアをしない。
1日1回(一時停止中を除く6分間)までの使用限度を守る。
肌トラブルの原因となります。

ベットには使用しない。
けがの原因となります。

電極部を金属・物にあてない。
発熱・発火・故障・破損の原因となります。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



屋外禁止

屋外で使用しない。
故障の原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。

お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

注意

使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。

事故・けがの原因となります。

顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用する。

メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。頬・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。事故・故障の原因となります。



必ず守る

電極とお肌の間に、常に専用セラムがあるように、途中で補充する。

専用セラムが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または水・専用セラムなどでお肌を湿らせてから使用する。そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。

使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した皮脂汚れや専用セラムなどを取り除く。

故障・肌トラブルの原因となります。

機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。

肌トラブルの原因となります。

使用中、コンタクトレンズのこすれを感じたら使用を中止するか、コンタクトレンズを外して使用する。

海外でのご使用について



警告



必ず守る

必ず交流100V~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。


発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


各部のなまえ

●本体

〈正面〉

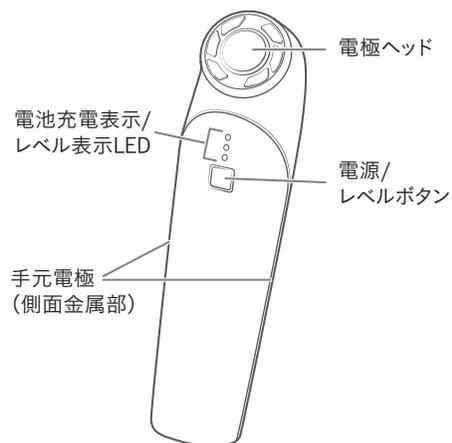

〈背面〉

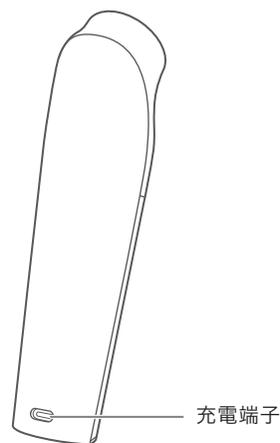

各部のなまえ

●付属品


- ・ACアダプター
- ・充電用USBケーブル(USB Type-C™)
- ・取扱説明書(保証書付)
- ・クイックガイド(Quick Guide)

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

充電のしかた


- ・本体と充電用USBケーブルを図のように接続すると、充電が始まります。

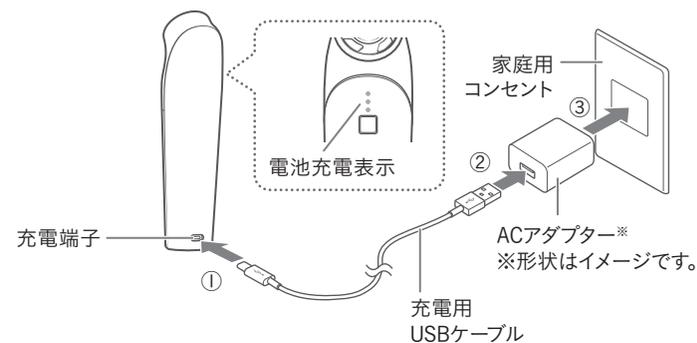

- 初めて使用するときは、充電をしてから使用してください。
- ※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。
- ※必ず付属のACアダプターと充電用USBケーブルを使用してください。
- ※充電端子に水や汚れが無いことを確認して接続してください。
- ※充電中は本体・アダプターが温くなります。手で触れられる程度の温度であれば問題ありません。

●充電表示

- ・充電中は、電池充電表示が下図の通りに点滅または点灯します。

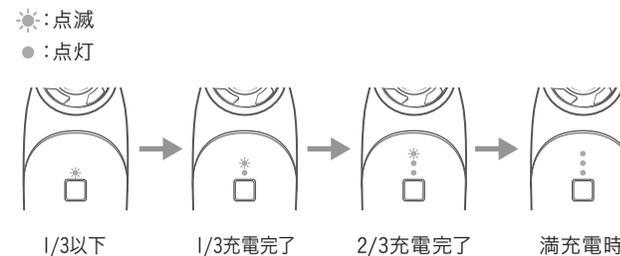

ご使用の前に

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5時間	約50分

※充電環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です。
※動作時間は使用レベル・使用環境によって変わります。
※電池の残量、使用環境によって、充電時間は前後します。

お肌へのプレテスト

※本製品や専用セラムを初めてご使用になる際は必ずお肌との相性をプレテストしましょう。


1 お肌を清潔な状態にする。

- 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取ります。

2 腕の内側に専用セラムを塗り、約3分間本製品を使用する。

- プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。

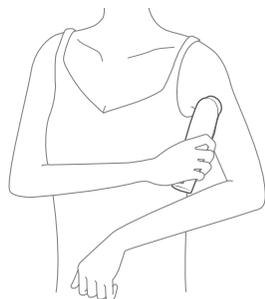

はたらき

●安全機能

- 温度センサー
お肌や電極ヘッドの温度が高くなり過ぎると、安全のため電源がオフになります(電極ヘッドの点滅5回とブザー音5回でお知らせ)。その場合は、約30分間本体を休ませてください。

●オートポーズ(自動一時停止)/ オートオフ(自動電源オフ)機能

電源をオンしてから約3分経過すると「ピピピッ」と音がなり、一時停止します(電極ヘッドが点滅)。電源/レベルボタンを押すと動作が再開し、約3分経過すると自動で電源がオフになります。
電極ヘッドが肌に触れていない状態や一時停止状態が約3分継続すると自動で電源がオフになります。

●電池残量表示


電源をオンまたはオフにすると、電池充電表示が3回点滅して電池残量をお知らせします。

- ☀: 点滅
- : 点灯



使いかた

使用順序

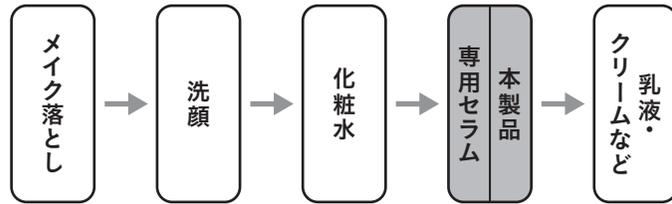


- ・顔の左右半分ずつケアします(合計 約6分間)。
- ・専用セラムとともにご使用ください。

使用上の注意

- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)は使用しないでください。
- LED光を直接のぞき込まないでください。
- 必ず手元電極に触れるように持ってください。
- 推奨使用環境温度15°C~30°C

ケアのしかた

電源/レベルボタンを長押し(約1秒)して電源をオンする。
電池残量表示後、電源/レベルボタンでレベルを選択する。

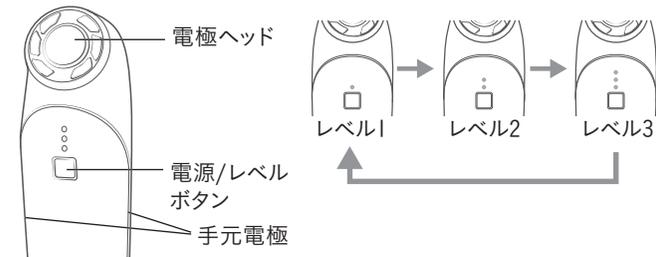

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
※ケアの途中でもレベルは変更できます。
※電極ヘッドは電源オンした後、約100秒で温かくなります。

2 顔の左右どちらか半分に専用セラムを3プッシュ分塗布する。

3 電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

※電極ヘッドが肌に触れると約3分間のケアが始まります。
※必ず手元電極(本体側面の金属部)に指が触れるように持ってください。

4 約3分後、「ピー」と鳴り、自動で一時停止したら、反対側に専用セラムを3プッシュ分塗布する。

※一時停止中は電極ヘッドが点滅します。

5 ボタンを短押しして一時停止を解除し、反対側のケアを開始する。

※ボタンを短押しすると「ビッ」と鳴り、電極ヘッドが点滅から点灯に変わります。

6 約3分後、「ピーピー」と鳴り、自動で電源がオフになる。

7 お肌を整える。

- ・ 適宜乳液やクリームなどを塗布してください。

8 電極ヘッドに付いた汚れや専用セラムを拭き取る (P.18参照)。

※専用セラムが不足していると感じた場合はケアの途中で付け足してください。

電極ヘッドを肌から離している間は時間の計測を停止します。

※電極ヘッドが肌に触れていない状態や一時停止状態が約3分間継続すると自動で電源がオフになります。

使
い
か
た

動かしかた (片側3分ずつのお手入れ)

はじめに

本体を動かすスピードの目安:1秒間に2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。

- ・ 電極ヘッド全体がお肌に触れるよう、お肌に垂直にあて、常に動かしながら使用してください。
- ・ 出力レベルは3段階ありますが、高いと熱く感じる場合があります。初めてご使用の方は、必ずレベル1で使用してください。
- ・ まぶたや目のまわり(骨のある部分までは使用可)、唇、首中央には電極ヘッドをあてないでください。

顔の左右半分ずつ、片側につき3分ずつケアします。

※専用セラムは、片側ずつ、美容機器によるケアの直前(電源オン直後、一時停止中)に塗布してください。(使用量の目安:1回3プッシュ)

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

①~③を数回繰り返し、最後に④を行ってください。



使用できない部位:まぶた、目のまわり(骨のある部分までは使用可)、唇、首中央



① 頬、顔の中心から外側へやや引き上げるように動かす

② 眉間から鼻側面へ動かす

使い終わったら

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

1 電源をオフにする。

2 電極ヘッドの汚れは、水を含ませてたたく絞った布で拭き取る。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・専用セラムが付着した状態で放置しないでください。
- ・防水製品ではありません。水洗いはしないでください。
- ・充電端子に汚れが付着していないことを確認してください。


3 電極ヘッド以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターと充電用USBケーブルを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避け、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.19～P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえお客様窓口(P.23)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

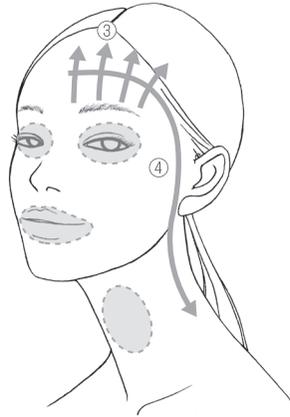

使いかた

- ③ 額の下から髪の生え際に向かって引き上げる
- ④ 最後に、額中央～こめかみ～耳の前～首筋～鎖骨へ流す

使い終わったら

こんなときには

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源/レベルボタンを長押ししていない	電源/レベルボタンを約1秒長押しして電源をオンにしてください
	充電不足	充電をしてください
充電しても数分しか使えない	充電電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた	販売店またはお客様窓口にご連絡ください(P.23) ※故障の原因となるためお客様では交換できません
	電源/レベルボタンを間違えて押ししまった	電源/レベルボタンを約1秒長押しして再度電源をオンにしてください
	オートオフになっている	電源/レベルボタンを押してください(P.14)
充電が開始されない (電池充電表示が点滅しない)	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない	ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください
	充電用USBケーブルが本体、ACアダプターに差し込まれていない	充電用USBケーブルを正しく差し込んでください(P.10)
	専用のACアダプターを使用していない	PCなどから充電すると電力が足りず充電されない場合があります。専用のACアダプターを使用してください
本体が熱い	連続使用した	電源をオフにして1時間以上休ませてください

こんなときには

こんな症状

考えられる原因

処置方法

熱い・電気刺激を感じすぎる	→ 設定レベルが高い	→ 電源/レベルボタンでレベルを下げてください
	→ 電極ヘッド全体がお肌に当たっていない	→ 電極ヘッド全体をお肌にあててください
	→ 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けている	→ 動かしながらかご使用ください
	→ 動かすスピードが遅い	→ 少し速く動かしてください
熱や電気刺激を感じない	→ 設定レベルが低い	→ 電源/レベルボタンでレベルを上げてください
	→ お肌が乾燥している	→ 専用セラムをお肌に足してください
	→ オートオフになった	→ 電源をオンにしてください
	→ 動かすスピードが速い	→ 少しゆっくり動かしてください

こんなときには

よくあるご質問

Q	A
朝、メイク前に使用しても良いですか？	問題ありません。専用セラムとともにお使いください。
毎日使用してもお肌に負担はないですか？	問題ありません。1日1回(一時停止中を除く6分間)までの使用限度は守ってください。 ※上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。
専用セラムの適切な使用量は？	片側ディスペンサー3回プッシュ分、顔全体で6回プッシュ分をお使いください。少し足りないと感じた場合は付け足すことをおすすめします。
お肌の上でスムーズに動かせません	・お肌の状態によっては最初に使用する専用セラムの使用量が足りないと、動きが悪い場合があります。 ・無理に動かそうとせずゆっくりと動かしてみてください。
ケア中に電気刺激や熱の感じ方が変わります	片側3分間の中で異なる刺激を送っているため問題ありません。
使用後にお肌がほてります	美容機器の温め効果によるものです。気になる場合は水や保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。保冷剤を使用する際は、お肌に直接触れないようにタオルを巻くなどしてご使用ください。 翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
使用後、お肌にポロカスが出ることがあります	乾燥によって発生することがありますが、乳液をコットンで塗布すると、ポロカスが取れ、滑らかなお肌になります。
顔や手にピリピリ感があります	美容機器の電気刺激によるものです。電源/レベルボタンで調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。 初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

こんなときには

Q	A
レベルは高い方が効果はありますか？	それぞれの肌状態に合っていることが重要ですので、ほてりやひりつくなど刺激を感じたらレベルを下げてください。
顔そり後は使用しない方がよいですか？	剃刀やシェーバーによってお肌に負担がかかっている場合がありますので、日を空けて使用することをおすすめします。
美容機器を動かすと顔のたるみが余計できるように感じます	力を入れ過ぎず、優しく動かしてください。
お風呂で使用できますか？	防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。
充電しても使用時間が短くなりました	充電電池の寿命と考えられます(約300回が目安)。充電電池は消耗品です(保証対象外)。交換をご希望の場合は、お客様窓口にご相談ください(P.23)。
廃棄するにはどうすればよいですか？	自治体の分別ルールに従って廃棄してください。本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

こんなときには

アフターサービス

●充電電池について

- ・充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはお客様窓口(下記)にご相談ください。

●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

お客様窓口

0120-81-2101 (通話料無料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

専用化粧品



**エフェクティム
スムーズ リフティング セラム**
販売名：エフェクティム SL セラム
内容量：30ml

商品詳細・お買い求めはお客様窓口(上記)にお問い合わせください。

WEBサイト www.effectimbeauty.com

※予告なく販売を終了する場合があります。



●製品仕様

定 格	DC5V 2.0A
消費電力	約3.5W(充電時)
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約3.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外形寸法	本体:約W50×D45×H185(mm)
製品質量	本体:約160g
材 質	本体:ポリカーボネート 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 手元電極:ステンレス
生産国	日本
付 属 品	ACアダプター、充電用USBケーブル、取扱説明書、クイックガイド(Quick Guide)
推奨環境温度	15°C~30°C

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品・付属品は除く)。
- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはお客様窓口(P.23)にご相談ください。



Memo

Memo

